

加熱濃縮装置

リアクティサーモ / リアクティバップ

迅速な溶媒濃縮や誘導体化に最適

あらゆるバイアルに使用可能

環境分析や食品分析に



Reacti-Therm
Reacti-Vap

リアクティサーモは、試料の誘導体化などで加熱処理を行う際、加熱するバイアルに合ったアルミブロックを設置穴にセットして、温度を設定するだけで簡単に反応処理を行える装置です。


スターラー付きもありますので、攪拌が必要な誘導体化にも使用できます。目的にあったブロックを別途お求めください。温度を正確に読みとる場合は、L型温度計を使用すると便利です。

リアクティブアップは、窒素を分岐し各バイアルに吹き付けることができるマニホールドです。リアクティサーモと組み合わせることにより、溶媒濃縮を迅速に行うことができます。



リアクティサーモ

リアクティサーモⅢ

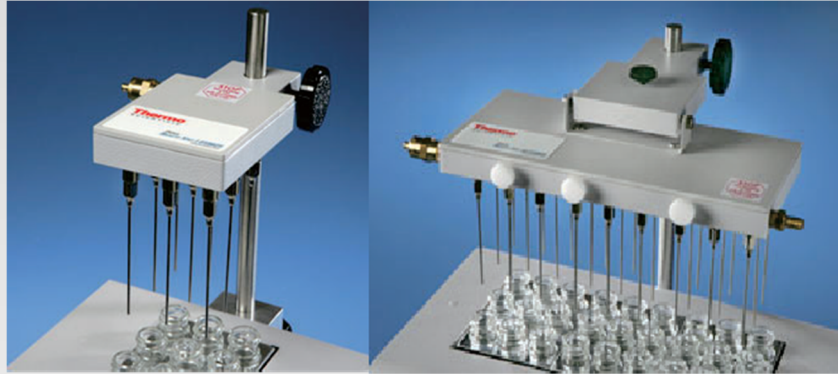

リアクティブアップ

リアクティブアップⅢ

様々なバイアルに対応するアルミブロックをご用意しています。

また、お客様の使用されているバイアルに合わせて穴開け加工も可能ですので、お気軽にお問合せください。

リアクティサーモ価格表

品名	Cat.No.	価格
リアクティサーモ	1030-44010	322,000
リアクティサーモ・スターラー付	1030-44011	448,000
リアクティサーモⅢ	1030-44030	476,000
リアクティサーモⅢ・スターラー付	1030-44031	560,000
L型温度計(0 - 200°C)	1030-44201	21,000

リアクティブアップ価格表

品名	Cat.No.	価格
リアクティブアップ (針 9 本・プラグ 9 個付)	1030-44014	168,000
リアクティブアップⅢ (針 27 本・プラグ 27 個付)	1030-44034	245,000
交換用針・プラグセット (針 9 本・プラグ 9 個付)	1030-44013	26,000




東京営業部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
 大阪支店 TEL.06(6220)0500 FAX.06(6220)0601
 横浜支店 TEL.045(985)7900 FAX.045(985)7901
 東北営業所 TEL.024(534)2191 FAX.024(536)1518
 筑波営業所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780
 北関東営業所 TEL.048(778)5001 FAX.048(778)5005
 千葉営業所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485
 名古屋営業所 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814
 広島営業所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110
 九州営業所 TEL.092(738)6633 FAX.092(738)6636

総合技術センター TEL.04(2934)2121 FAX.04(2934)2128
 カスタマーサポートセンター TEL.04(2934)1100 FAX.04(2934)3361
 福島工場 TEL.024(533)2244 FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp

 **安全に関するご注意**
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2023年2月時点のものです。
 AA665-20101025PDF