

残留農薬分析の簡易・迅速固相前処理に用いる 少量充填ミニカラム

InertSep® C18/SAX/PSA (200 mg/100 mg/ 100 mg/1 mL)


農作物中の残留農薬分析における迅速一斉分析法の固相前処理に用いる少量充填ミニカラムに三層ミニカラム InertSep C18/SAX/PSA (200 mg/100 mg/100 mg/1 mL) がラインアップとして追加されました。

特長

- ✓ **使用する溶媒はアセトニトリルのみ**
- ✓ **簡単・迅速な処理方法**
操作方法は三層固相に作物抽出液を0.5 mL 負荷し、追加溶媒を流すだけの操作
- ✓ **夾雑成分の除去に有効**
作物抽出液中の脂質・色素・脂肪酸などの除去が可能
- ✓ **食品分析の自動化も可能**
食品分析用自動化前処理装置G-Prep FAを用い、固相前処理操作の自動化も可能

G-Prep FAと少量充填ミニカラムによる自動残留農薬前処理事例


No.1 迅速一斉分析法

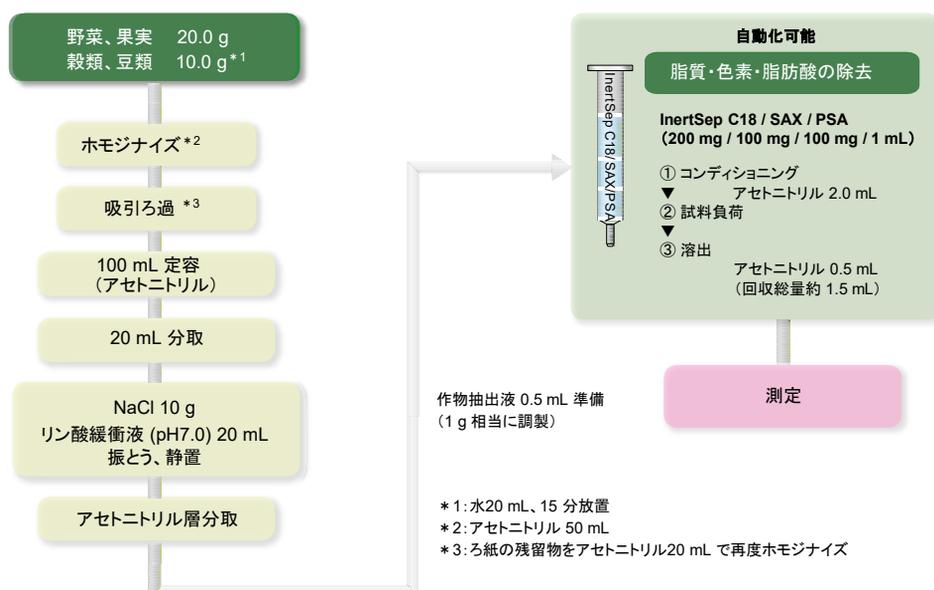

食品分析用自動化前処理装置G-Prep FAIに関する資料はQRコードにてご参照ください。



No.2 一斉試験法をサイズダウン化した方法

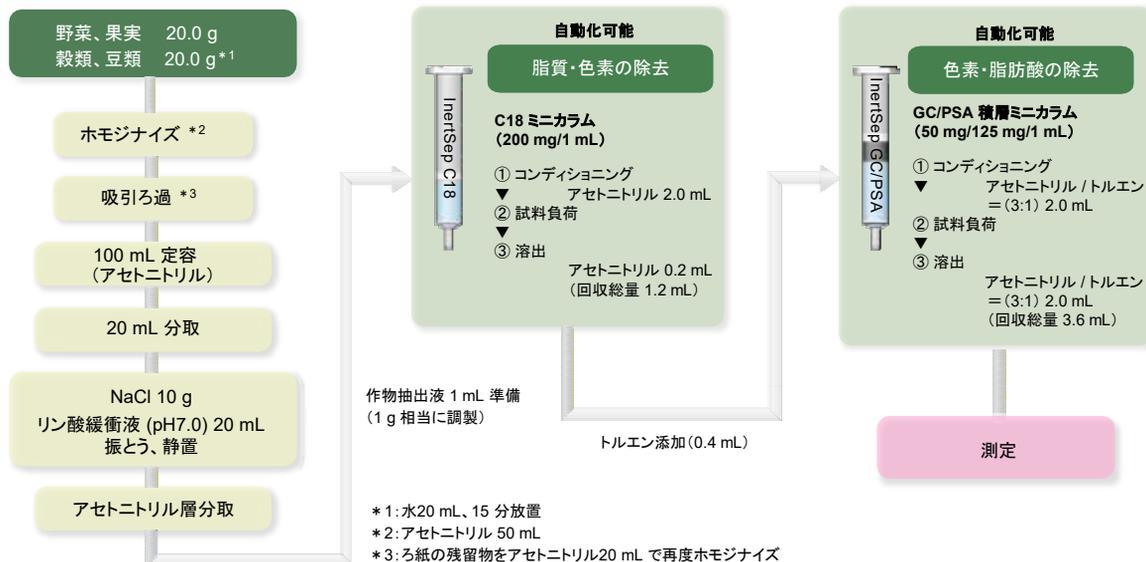

残留農薬一斉分析を簡略化させる方法の一つとして、ミニカラムのサイズダウン化を検討されているお客様にお薦めです。



new

InertSep C18/SAX/PSA
200 mg/100 mg/100 mg/1 mL



InertSep C18
50 mg/1 mL



InertSep GC/PSA
50 mg/50 mg/1 mL



InertSep GC/PSA
50 mg/125 mg/1 mL

品名	サイズ	入数	Cat.No.	価格
InertSep C18/SAX/PSA	200 mg/100 mg/100 mg/1 mL	100 本	5010-68110	53,000
InertSep C18	50 mg/1 mL	100 本	5010-61000	27,000
	200 mg/1 mL	50 本	5010-61016	17,000
InertSep GC/PSA	50 mg/50 mg/1 mL	50 本	5010-68016	25,000
	50 mg/125 mg/1 mL	50 本	5010-68017	27,000

注) 上記以外の充填剤・充填量も対応可能です。お問い合わせください。

GL Sciences ジェールサイエンス株式会社

東京営業部 TEL.03(5323)6611
大阪支店 TEL.06(6220)0500
横浜支店 TEL.045(985)7900
東北営業所 TEL.024(534)2191
筑波営業所 TEL.029(858)3700
北関東営業所 TEL.048(778)5001
千葉営業所 TEL.043(248)2441
名古屋営業所 TEL.052(931)1761
広島営業所 TEL.082(233)1101
九州営業所 TEL.092(738)6633

FAX.03(5323)6622
FAX.06(6220)0601
FAX.045(985)7901
FAX.024(536)1518
FAX.029(858)3780
FAX.048(778)5005
FAX.043(248)2485
FAX.052(931)1814
FAX.082(233)1110
FAX.092(738)6636

総合技術センター TEL.04(2934)2121
カスタマーサポートセンター TEL.04(2934)1100
福島工場 TEL.024(533)2244

FAX.04(2934)2128
FAX.04(2934)3361
FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
https://www.gls.co.jp E-mail:info@gls.co.jp



安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2018年12月時点のものです。