

- ✓ 試薬調製時の負担軽減
- ✓ 試薬コストの削減
- ✓ 異臭分析の簡便化



異臭成分は、微量でも強いにおいを持つ化合物が多く、試料調製時に不快臭を拡散させてしまうなど、取扱上の問題があります。
 本品は、異臭として多く取り上げられる消毒臭・カビ臭の代表的な成分の 1 µg/mL 混合試薬です。
 扱いやすい濃度にあらかじめ希釈されているため、異臭取扱時の負担や試薬購入コストを軽減することができます。

注)本試薬は、大和サービス株式会社 加藤 寛之氏(元 大和製罐株式会社 総合研究所 所長)のご指導、選定の下、異臭で問題となる成分を含有した、におい嗅ぎ分析用異臭混合試薬セットです。
 製造・販売はジーエルサイエンス株式会社が行っています。
 本製品に関するお問い合わせはジーエルサイエンス株式会社まで お願いいたします。

◆単品製品

品名	成分	希釈溶媒	濃度	容量	Cat. No.	価格
消毒臭混合試薬 [冷蔵]	2-Chlorophenol 2,4-Dichlorophenol 2,6-Dichlorophenol 2,4,6-Trichlorophenol 2-Bromophenol 2,4-Dibromophenol 2,6-Dibromophenol 2,4,6-Tribromophenol	n-Hexane	1 µg/mL	1 mL × 3	1021-10034	12,000
カビ臭混合試薬 [冷蔵]	2-Methylisoborneol Geosmin 2,4,6-Trichloroanisole 2,4,6-Tribromoanisole	n-Hexane	1 µg/mL	1 mL × 3	1021-10035	12,000

◆キット製品

品名	内容	Cat. No.	価格
異臭分析用混合試薬キット [冷蔵]	消毒臭混合試薬(1021-10034) × 1箱(1 mL × 3) カビ臭混合試薬(1021-10035) × 1箱(1 mL × 3)	1021-10036	22,000

注)[冷蔵]は冷蔵輸送品です。冷蔵送料 ¥1,000が別途必要となります。冷蔵輸送品のため、返品はご遠慮ください。


分析例

Conditions

System : GC/MS
 Column : InertCap Pure-WAX, 0.25 mm I.D. × 30 m, df = 0.25 μm
 Col. Temp. : 50 °C (5 min) - 10 °C/min - 250 °C
 Carrier Gas : He, 1.0 mL/min
 Injection : 250 °C, Splitless, 1 μL
 Detection : MS FASST mode




消毒臭混合試料(1021-10034)使用

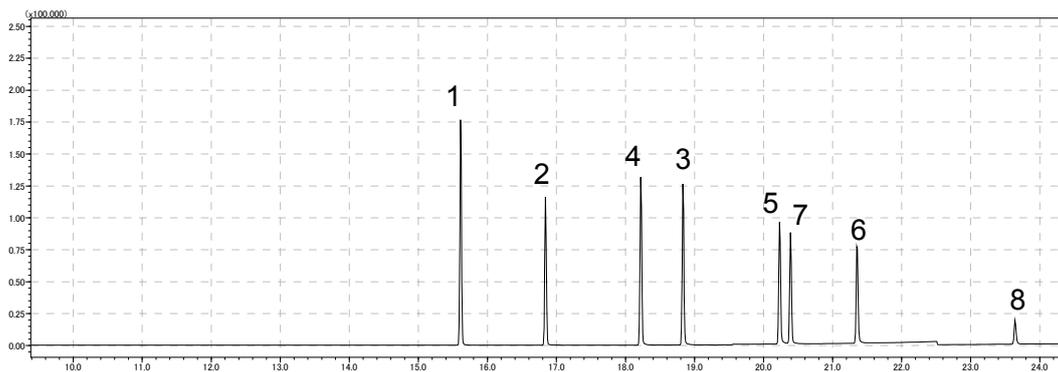

1. 2-Chlorophenol
2. 2-Bromophenol
3. 2,4-Dichlorophenol
4. 2,6-Dichlorophenol
5. 2,4,6-Trichlorophenol
6. 2,4-Dibromophenol
7. 2,6-Dibromophenol
8. 2,4,6-Tribromophenol

カビ臭混合試料(1021-10035)使用

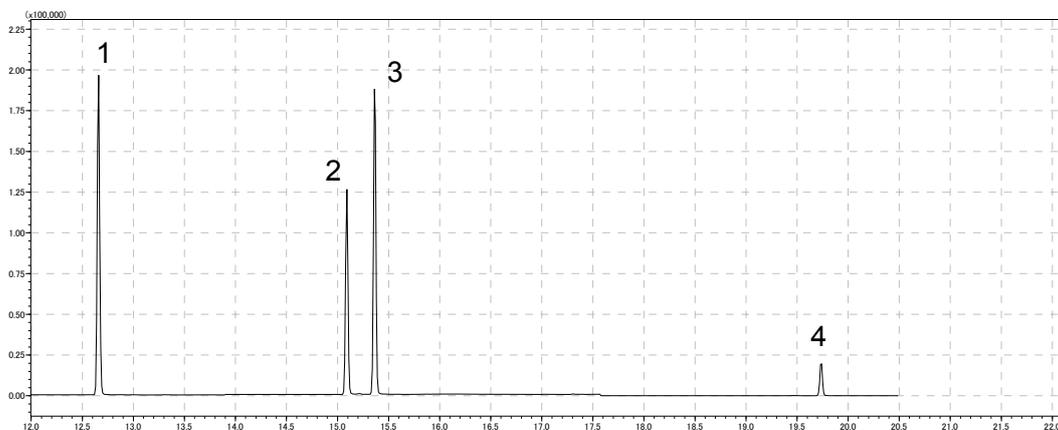

1. 2-Methylisoborneol
2. 2,4,6-Trichloroanisole
3. Geosmin
4. 2,4,6-Tribromoanisole




東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@gls.co.jp



安全に関するご注意
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。