

アジレント・テクノロジー

2020 カラム・消耗品サマーキャンペーン

キャンペーン期間：2020年9月30日まで



新製品 GC 注入口セプタム・フリット付ライナ	
セルフタイトカラムナット	2
GC オートサンプリング・カラーマニユアルシリンジ	3
ガスフィルタ製品	4
新製品 ガスクリーンセンサー	5
InfinityLab フィッティング	6
InfinityLab セーフティキャップ・溶媒スリムボトル	7
新製品 Captiva フィルタバイアル	8



BTO セプタム

GC 注入口セプタム

アジレントはさまざまなアプリケーションに適合する、異なる耐温性のセプタムを提供します。推奨温度以上でセプタムを使用すると、リークしたり劣化することがあります。問題を最小限に抑えるには、次の事項について留意してください。

- 推奨温度範囲内で使用する。定期的に変換する。
- 可能であればセプタムパージを使用する。オートインジェクタを使用する。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5183-4757-100	ノンスティックブリード / 温度最適化 (BTO) セプタム 11 mm, 100 個, 注入口最高使用温度: 400 °C	100/pk	¥20,000 → キャンペーン価格 ¥17,000
5183-4759-100	ノンスティック高性能グリーンセプタム、 11 mm, 100 個, 注入口最高使用温度: 350 °C	100/pk	¥18,000 → キャンペーン価格 ¥15,300
5183-4761-100	ノンスティックロングライフセプタム、 11 mm, 100 個, 注入口最高使用温度: 350 °C	100/pk	¥23,000 → キャンペーン価格 ¥19,550
5080-8894-100	汎用セプタム、シリコンラバー製 11 mm, 100 個, 注入口最高使用温度: 350 °C	100/pk	¥14,000 → キャンペーン価格 ¥11,900

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

新製品 フリット付ライナ



- 焼結ガラスフリットを中央、または下部に設置したライナになります。
ガラスウールを使用していないため、ウールの繊維が GC フローパスに流れ込む心配がありません。
- ガラスウールを使用する時と同等の気化特性を持ち、性能と品質の一貫性があります。
- ミッドフリットシングルテーパライナ：一般的なスプリット / スプリットレス分析や、塩基性薬物の分析に最適です。
- ローフリットシングルテーパライナ：SVOC および OC/OP 農薬のスプリットレス分析に最適です。

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5190-5105	スプリットレス, UI, ミッドフリットライナ, 4 mm, 1 本	¥6,800 → キャンペーン価格 ¥5,780
5190-5105-005	スプリットレス, UI, ミッドフリットライナ, 4 mm, 5 本	¥26,000 → キャンペーン価格 ¥22,100
5190-5112	スプリットレス, UI, ローフリットライナ, 4 mm, 1 本	¥6,800 → キャンペーン価格 ¥5,780
5190-5112-005	スプリットレス, UI, ローフリットライナ, 4 mm, 5 本	¥26,000 → キャンペーン価格 ¥22,100

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

新製品 セルフタイトカラムナット

工具のいらぬ GC カラム接続。簡単・確実に接続できる手締めナットが新しくなりました。ナットを固定するためのセプタムが必要ありません。

- 信頼性の高い接続：カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、フェラルが常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。
- 時間のロスを回避：オープン昇温プログラム後に、カラムナットを締めなおす必要がありません。
- 使いやすさ：指で締められるため、スパナなどの工具が必要ありません。
どなたでも一貫性の高い確実なカラム接続が可能です。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
セルフタイトナット (アジレント用)		
G3440-81011	<New> セルフタイトナット, カラー付, 注入口および検出器用	¥11,000 → キャンペーン価格 ¥9,350
G3440-81013	<New> セルフタイトナット, カラー付, MS トランスファライン用	¥12,000 → キャンペーン価格 ¥10,200

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

GC オートサンプリング

ブルーラインオートサンプリングは、従来のシリンジより、プランジャの寿命を延ばし、ダウンタイムを低減することで生産性を高めます。

- オートサンプリングのストロークメカニズムとマッチし、より正確な容量を注入可能。
- セパタムの芯抜きを減らし、システムのダウンタイムを減らす滑らかなニードル。
- 用途に合わせ、PTFE チップ付プランジャまたは金属製プランジャから選択可能。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
G4513-80209	ストレートニードルシリンジ, ニードル固定型, 10 μL, 23/42/HP	1/pk	¥6,400 → キャンペーン価格 ¥5,440
G4513-80218	テーパードリルシリンジ, ニードル交換型, 10 μL, 23-26s/42/HP, 23/42/HP	1/pk	¥8,800 → キャンペーン価格 ¥7,480
G4513-80236	交換用ニードル	3/pk	¥7,900 → キャンペーン価格 ¥6,715
G4513-80220	ストレートニードルシリンジ, ニードル固定型, 10 μL, 23/42/HP, PTFE チップ付プランジャ	1/pk	¥7,800 → キャンペーン価格 ¥6,630

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。



ブルーライン
オートサンプリング


カラーマニュアルシリンジ

- シリンジ容量で色分けされており、読み取りやすい垂直方向のスケール (目盛り)。
- さまざまな容量のシリンジをご提供。
- 適合証明書によりロットを追跡可能。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5190-1488	マニュアルシリンジ, ニードル固定型, 10 μL, フレキシブルプランジャ, 26/50/ ベベル	1/pk	¥6,200 → キャンペーン価格 ¥5,270
5190-1502	マニュアルシリンジ, ニードル交換型, 50 μL, 25/50/ ベベル	1/pk	¥8,800 → キャンペーン価格 ¥7,480
5190-1496	交換用ニードル, 50 mm, 25 ゲージ, ベベルチップ	3/pk	¥3,500 → キャンペーン価格 ¥2,975

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

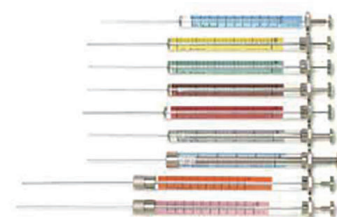

カラーマニュアルシリンジ

キャンペーン内容

GC 注入口セパタム・ライナ・セルフタイトカラムナット・GC オートサンプリングシリンジ・マニュアルシリンジ製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2020年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1712** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2020supplylist>

ガスフィルタの交換はいつしましたか？

ガスの純度が悪い場合、機器の故障や不完全な分析結果につながる可能性があります。ガス精製は、システム性能を最適化するために重要なステップです。

- 大型ユニバーサルトラップは、容量が非常に大きいため、経済性に優れています。
- S型トラップは、長年 GC 分析で使用され、経済的で、水分、炭化水素用などさまざまな種類があります。
- ガスクリーンフィルタは、インジケータの色の変化により、フィルタの交換時期を知らせます。



大型ユニバーサルトラップ



S型トラップ



ガスクリーンフィルタ

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
RMSH-2	大型ユニバーサルトラップ, ヘリウム (Ar/Me) 用, 1/8 インチ	1/pk	¥45,000 → キャンペーン価格 ¥38,250
RMSN-2	大型ユニバーサルトラップ, 窒素用, 1/8 インチ	1/pk	¥45,000 → キャンペーン価格 ¥38,250
5060-9084	水分 S 型トラップ, コンディショニング済, 1/8 インチ	1/pk	¥31,000 → キャンペーン価格 ¥26,350
5060-9096	炭化水素 S 型トラップ, コンディショニング済, 1/8 インチ	1/pk	¥40,000 → キャンペーン価格 ¥34,000
CP736530	ガスクリーンフィルタキット, 1/8 インチ, 4 ポジション	1/pk	¥216,000 → キャンペーン価格 ¥183,600
CP17976	ガスクリーン GC/MS フィルタキット, 1/8 インチ, 1 ポジション	1/pk	¥96,000 → キャンペーン価格 ¥81,600

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

ガスフィルタ製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2020年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1712** とご連絡ください。


キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2020supplylist>

ガスクリーンセンサー

- インジケータの色の変化をモニター。
- ガスクリーンフィルタのガス吸着能が飽和してインジケータの色が変わると、ディスプレイやソフトウェア上でアラートを表示します。
- GC カラム寿命の延長やシステムの汚染を防止します。
- Intuvo GC 用もご用意。

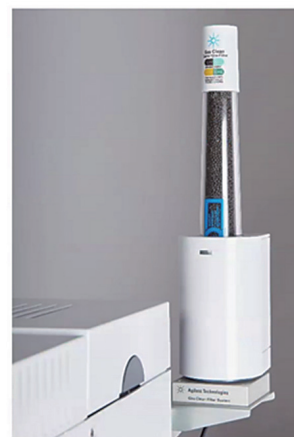

ガスクリーンセンサー

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
CP179880	ガスクリーンキット, 8890 および 8860GC 用 ※ガスクリーンセンサー, ガスクリーンキャリアガスフィルタ, 1/8 インチコネクティングユニット, マウンティングブラケットが含まれます。	1/pk	¥81,000 → キャンペーン価格 ¥48,600
CP17995	Intuvo ガスクリーンフィルタキット ※ガスクリーンセンサー, ガスクリーンキャリアガスフィルタ, 1/8 インチコネクティングユニット, マウンティングブラケットが含まれます。	1/pk	¥81,000 → キャンペーン価格 ¥48,600
CP179885	ガスクリーンセンサー、本体のみ	1/pk	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥13,200

キャンペーン内容

上記ガスクリーンセンサー製品をお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **40%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2020年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1662** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら




<http://www.agilent.co.jp/chem/2020supplylist>

InfinityLab フィッティング

- 手締めでのフィッティングのため、スパナなどの工具が必要ありません。
- すべてのタイプの UHPLC カラムで使用可能です。
- 200 回以上使用可能な耐久性、キャピラリーのみ、フェラルのみの交換が可能です。

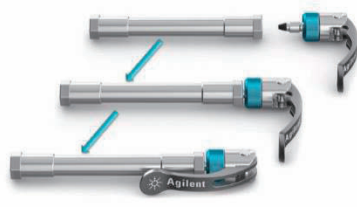

※キャピラリーとフェラルは専用。



InfinityLab クイックコネクットフィッティングは、手締めで接続した後、レバーを閉じることで 130 MPa まで使用可能です。

InfinityLab クイックターンフィッティング (60 MPa 耐圧)
※ 130 MPa まで耐圧がありますが、工具での増し締めが必要です。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	価格 (円、税別)
 InfinityLab クイックコネクットフィッティング (130 MPa 耐圧)		
5067-5961	クイックコネクットフィッティングアセンブリ 0.075 x 105 mm	¥37,000 → キャンペーン価格 ¥31,450
5067-5957	クイックコネクットフィッティングアセンブリ 0.12 x 105 mm	¥37,000 → キャンペーン価格 ¥31,450
5067-5958	クイックコネクットフィッティングアセンブリ 0.12 x 150 mm	¥37,000 → キャンペーン価格 ¥31,450
※アセンブリは、フィッティング、キャピラリー、フェラルのセットになります。		
 InfinityLab クイックターンフィッティング (60 MPa 耐圧)、専用キャピラリー		
5067-5966	クイックターンフィッティング ※別途ロングソケットのキャピラリーが別途必要です。	¥15,000 → キャンペーン価格 ¥12,750
5500-1188	ステンレスキャピラリー, 0.12 mm x 105 mm, ロングソケット	¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,420
5500-1189	ステンレスキャピラリー, 0.12 mm x 150 mm, ロングソケット	¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,420
5500-1193	ステンレスキャピラリー, 0.17 mm x 105 mm, ロングソケット	¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,420
5500-1194	ステンレスキャピラリー, 0.17 mm x 150 mm, ロングソケット	¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,420
※クイックターンフィッティングは、別途ロングソケットキャピラリーの購入が必要です。		

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

InfinityLab フィッティング製品をお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2020年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1712** とご連絡ください。


キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2020supplylist>

InfinityLab セーフティキャップ、溶媒スリムボトル

- ラボ内の溶媒の蒸気と漏れからお客様を守ります。
- HPLC で使用する一般的な溶媒ボトルに適合 (GL45 など)
- ベントバルブにタイムストリップ (ラベルタイマー) が付き、ベントバルブの交換時期がわかります。
- HPLC 移動相で使用される溶媒ボトルのデザインが一新されました。人間工学に配慮したデザインを採用。本体がスリムになり、両側にグリップゾーンが設けられているため、持ちやすく安全に使用できます。

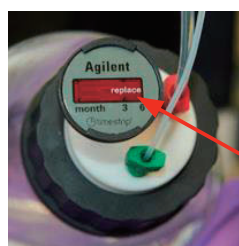

ベントバルブ、チャコールフィルタのタイムストリップをご確認ください！
すべて赤くなっていたら交換時期です。



タイムストリップ：ベントバルブの交換時期 (約 6 か月：使用状況によります) を知らせてくれます。



溶媒スリムボトルは、セーフティキャップと組み合わせて使用できます。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	価格 (円、税別)
InfinityLab セーフティキャップ：溶媒ボトル用		
5043-1217	セーフティキャップ, GL45 1ポート, 1ベントバルブ	¥10,000 → キャンペーン価格 ¥8,500
5043-1218	セーフティキャップ, GL45 2ポート, 1ベントバルブ	¥12,000 → キャンペーン価格 ¥10,200
5043-1219	A-Line セーフティキャップ, GL45 3ポート, 1ベントバルブ	¥15,000 → キャンペーン価格 ¥12,750
5043-1220	A-Line セーフティキャップ, GL45 4ポート, 1リークホース	¥18,000 → キャンペーン価格 ¥15,300
5043-1190	タイムストリップ付きベントバルブ, PTFE, 1µm	¥3,200 → キャンペーン価格 ¥2,720
5043-1214	フィッティング, 外径 1.6 mm チューブ用, PFA (2個)	¥3,700 → キャンペーン価格 ¥3,145
5043-1215	フィッティング, 外径 2.3 mm チューブ用, PFA (2個)	¥3,700 → キャンペーン価格 ¥3,145
5043-1216	フィッティング, 外径 3.2 mm チューブ用, PFA (2個)	¥3,700 → キャンペーン価格 ¥3,145
InfinityLab セーフティキャップ：廃液ボトル用		
5043-1221	5043-1196 (6 L 廃液ボトル, GL45) + 5043-1220 ※別途 5043-1193 チャコールフィルタ必要	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥18,700
5043-1193	チャコールフィルタ (58 g), タイムストリップ付, 廃液ボトル用	¥14,000 → キャンペーン価格 ¥11,900
5043-1192	ガロン瓶用変換アダプタ PTFE GL45 (M) - GPI38 (F)	¥14,000 → キャンペーン価格 ¥11,900
5043-1198	スクリュープラグ, 1/8 インチ, PTFE, 2個	¥5,900 → キャンペーン価格 ¥5,015
5043-1207	2ポート付き廃液コレクタ, PTFE, 2又	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥18,700
InfinityLab 溶媒スリムボトル		
9301-6524	溶媒スリムボトル, 透明, 1,000 mL	¥2,100 → キャンペーン価格 ¥1,785
9301-6526	溶媒スリムボトル, 茶色, 1,000 mL	¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,420

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

InfinityLab セーフティキャップ、溶媒スリムボトル製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2020年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1712** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら




<http://www.agilent.co.jp/chem/2020supplylist>

サンプル前処理

Captiva フィルタバイアル

アジレントのフィルタバイアルは、GC、LC 分析におけるワークフローの工程を削減します。

- シリンジ、シリンジフィルタ、別のバイアルとキャップが不要
- 環境に配慮した設計により、サンプルろ過プロセスで廃棄されるガラスとプラスチックを低減
- 3 ステップでバイアル内でのフィルタ作業が完了

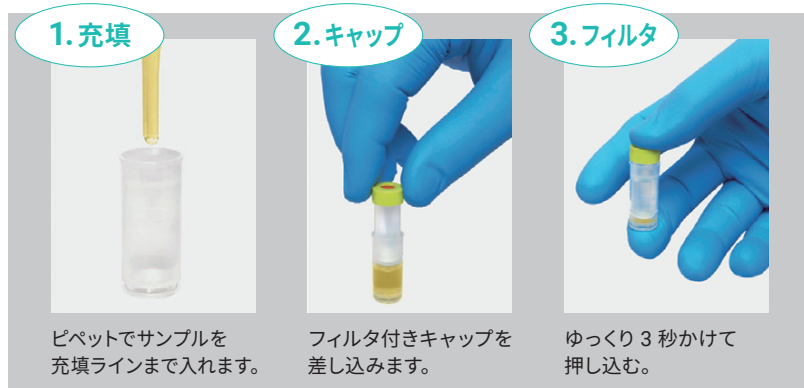

5191-5943 バイアルクロージングツールは最大9本を一度にフィルタ可能です。

部品番号	品名	価格(円、税別)
5191-5933	0.45 μm PTFE フィルタバイアル, 100 個	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥28,900
5191-5934	0.20 μm PTFE フィルタバイアル, 100 個	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥28,900
5191-5935	0.45 μm ナイロンフィルタバイアル, 100 個	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥28,900
5191-5936	0.20 μm ナイロンフィルタバイアル, 100 個	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥28,900
5191-5939	0.45 μm RC フィルタバイアル, 100 個	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥28,900
5191-5940	0.20 μm RC フィルタバイアル, 100 個	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥28,900
5191-5941	0.45 μm PES フィルタバイアル, 100 個	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥28,900
5191-5942	0.20 μm PES フィルタバイアル, 100 個	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥28,900
5191-5943	バイアルクロージングツール	¥46,000 → キャンペーン価格 ¥39,100

※ PTFE: ポリテトラフルオロエチレン、RC: 再生セルロース、PES: ポリエーテルスルホン

※オートサンブラで使用する場合には、ドローポジション(ニードル高さオフセット)を10mmに設定し、底部センサーはオフにしてください。

キャンペーン内容

上記 Captiva フィルタバイアル製品をお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2020年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1712** とご連絡ください。

お願い/注意事項

- 在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
- 本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

アジレント・テクノロジー株式会社
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2020supplylist>

 **Agilent**
Trusted Answers