


GL Sciences New Topic

Vol.11

018年12月号

多検体を迅速、安全にろ過するためのフィルタープレート

FastRemover® MF

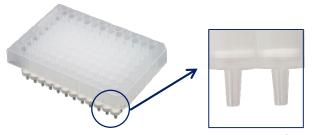


FastRemover先端の形状

フィルター底面のノズルが長いフィルタープレートです。サンプル間のクロスコンタミを最小に処理することができます。

クロスコンタミの確認

高濃度(100 ppm)塩化ベルベリンをスパイクした50 %メタノール溶液とスパイクしていないサンプル各500 μLを市松模様上に配置し、吸引処理を行いました。ロングノズルを採用しているため、薬物をスパイクしていない48サンプル溶液では、薬物のピークは確認されません。

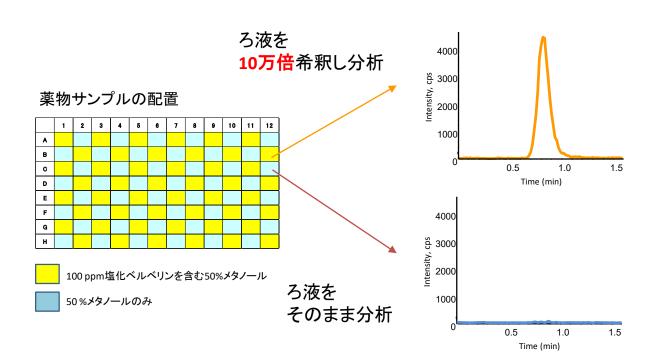

ろ液のクロスコンタミを最小化できます!

ジーエルサイエンス

価格表

品名	入数	Cat.No.	価格
FastRemover MF (0.2 μm)	50個	7510-11037	330,000
FactDemover for Protein (0.45 up)	1個	7820-11001	9,800
FastRemover for Protein (0.45 μm)	5個	7820-11005	45,000
FastRemover for Protein (0.2 μm)	1個	7820-11011	9,800
	5個	7820-11015	45,000
FastRemover for Phospholipid (0.2 μm)	1個	7510-11021	28,000

関連製品

品名	入数	Cat.No.	価格
GL-SPE 小型吸引マニホールドキットウェルプレート用96W	1式	5010-50155	58,000
バキュームコントローラー	1個	5010-33071	43,000
バキュームキット	1式	5010-50040	87,000
WebSeal Mat 96スクエアーウェル用 60180-M112	5枚	1030-43831	22,000
マイクロプレート用シーリングテープ(アルミ)	100枚	1065-70001	12,500
マイクロプレート用シーリングテープ(ポリオレフィン)	100枚	1065-70002	12,500
ウェルプレート用シリコンマット	3枚	7510-11030	9,800



小型吸引マニホールドキット 96W




バキュームコントローラー



バキュームキット



シーリングテープ

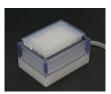

シリコンマット



ジーエルサイエンス株式会社

61 Sciences

営 業 部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622 大 店 阪 支 FAX.06(6220)0601 TEL.06(6220)0500 横 TEL.045 (985) 7900 FAX.045(985)7901 支 店 北 業 TEL.024(534)2191 FAX.024(536)1518 東 営 所 筑 波 営 業 所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780 北 関東営 業 所 TEL.048 (778) 5001 FAX.048 (778) 5005 千 葉 営 業 所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485 名 古屋営業 所 TEL.052 (931) 1761 FAX.052(931)1814 広 島 営業 所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110 州 営 業 TEL.092(738)6633 FAX.092(738)6636

総合技術センター カスタマーサポートセンター 福島エ場 TEL.04(2934)2121 TEL.04(2934)1100 TEL.024(533)2244 FAX.04(2934)2128 FAX.04(2934)3361 FAX.024(534)2139

- ●掲載している価格には消費税が含まれていません。
- ●改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- ●本文中には TM および ® マークは明記しておりません。
 データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しましても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本 社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622

https://www.gls.co.jp E-mail:info@gls.co.jp

