



公定法準拠 土壌溶出試験における操作フロー

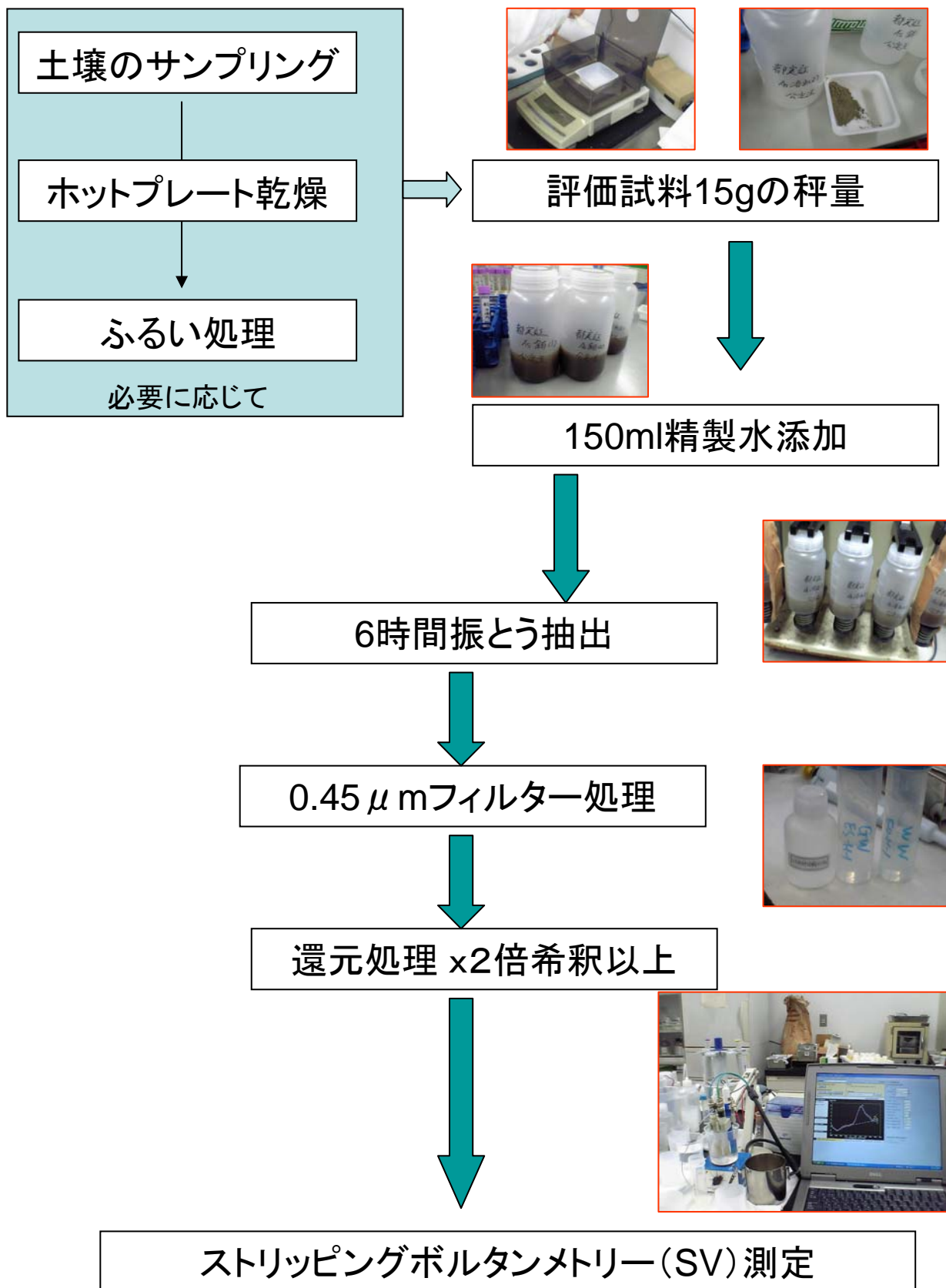

公定法準拠 土壌含有試験における操作フロー

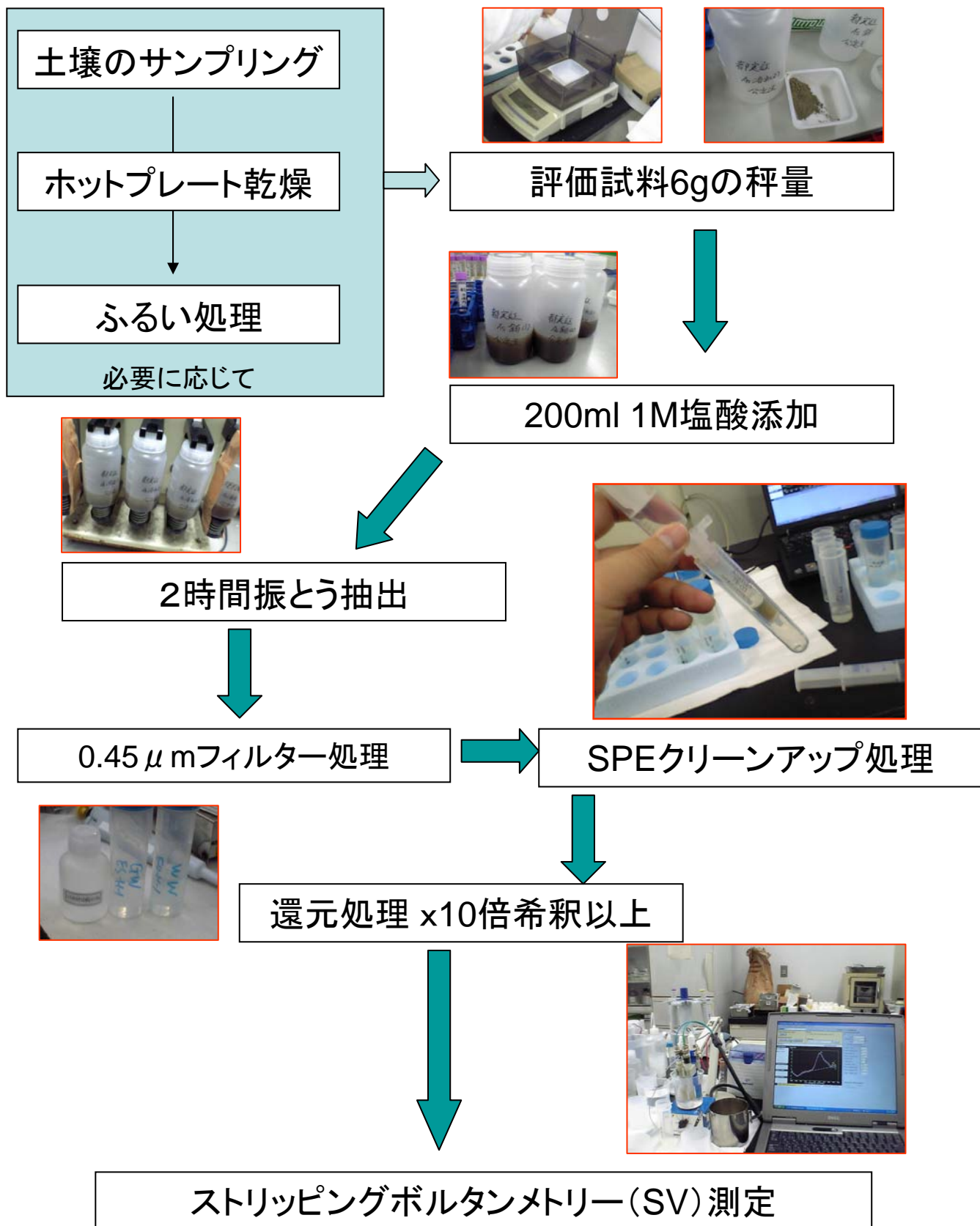

土壌 簡易溶出試験における操作フロー


土壌のサンプリング

ホットプレート乾燥

ふるい処理

必要に応じて

評価試料2gの秤量

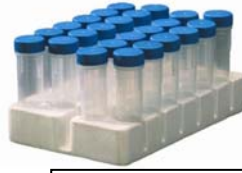

20ml精製水添加



30分70°C加温抽出

1分振とう抽出

0.45 μ mフィルター処理

還元処理 x2倍希釈以上

ストリッピングボルタンメトリー(SV)測定

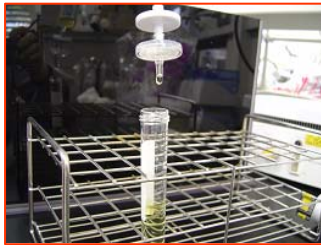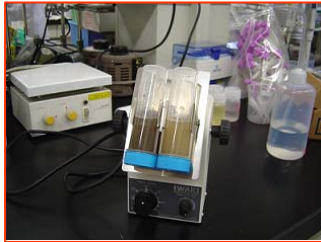

土壌 簡易含有試験における操作フロー

