

液液抽出用珪藻土カラム

InertSep K-solute Plus キャンペーン



25%
OFF

今なら

珪藻土カラム

34,500円(100本)から！

キャンペーン期間

2024年**8月1日**(木) ~ **10月31日**(木)


紹介動画

珪藻土カラムを動画で分かりやすく解説！

液液抽出とは？



混じり合わない
2つの液

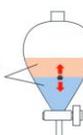

どちらに
溶けやすいか



珪藻土カラムの特長



- ・ 試料負荷
- ・ 浸透
- ・ 溶媒抽出

3ステップ



InertSep K-solute Plus の特長


カラムで液液抽出操作が可能

InertSep K-solute Plusは、天然素材の珪藻土から作られた前処理用のカラムです。液液抽出で問題となりやすい、エマルジョンの影響を受けることなく、水溶液中の目的成分（脂溶性物質）を溶媒抽出できます。

高い通液性・通液再現性


粒度分布が狭いため通液再現性が高く、粒子径が大きいため高い通液性をもちます。

ジーエルサイエンス InertSep K-solute Plus

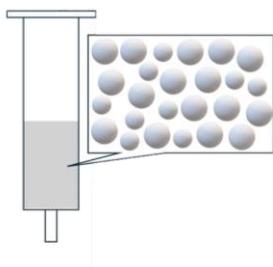

粒子が均一なため
通液再現性が高い

他社 珪藻土カラム

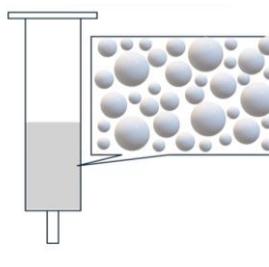

粒子がバラバラなため
通液再現性が低い

対象製品

InertSep K-solute Plus 価格表



容量	適用試料量	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
12 mL	2 mL	100本	5010-68250	46,000	34,500
20 mL	5 mL	100本	5010-68251	52,000	39,000
60 mL	10 mL	100本	5010-68252	60,000	45,000
60 mL	20 mL	100本	5010-68253	69,000	51,750
150 mL	50 mL	50本	5010-68254	72,000	54,000



支える、あらゆる分析を。

ジーエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当の各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。