

ピーク形状を改善するJ&WウルトラライナートGCカラム

極性化合物の分析には、ポリエチレングリコール (PEG) を固定相とするGCカラムが広く使用されています。このカラムは、食品、香り、および香料アプリケーションや、品質管理ラボおよびメソッド開発ラボでの化学分析に最適です。


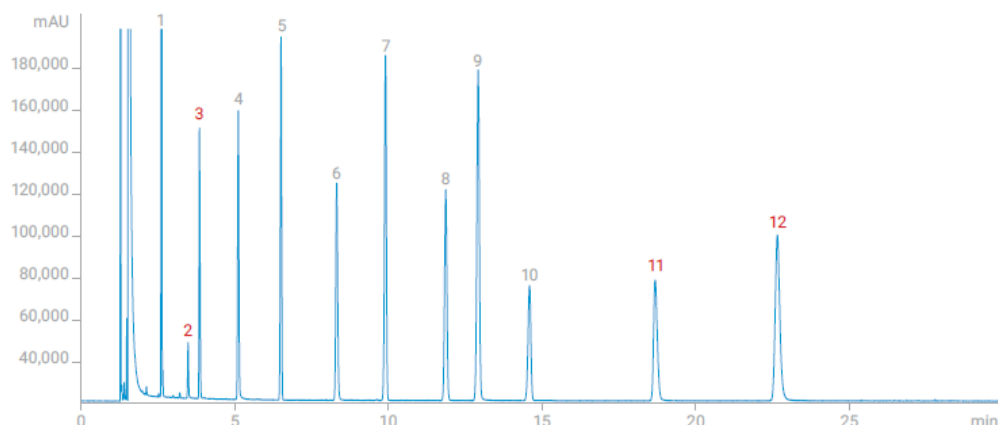


図1. DB-WAXウルトラライナートによるテスト混合物の分析

各ピークの成分：

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 2-ノナン | 7. デカン酸メチル |
| 2. デカナール | 8. 2-クロロフェノール |
| 3. プロピオン酸 | 9. 1-ウンデカノール |
| 4. エチレングリコール | 10. ノナデカン |
| 5. ヘプタデカン | 11. 2-エチルヘキサン酸 |
| 6. アニリン | 12. エチルマルトール |

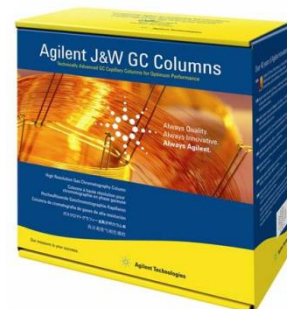

<新製品> フリット付ライナ



- ・焼結ガラスフリットを中央、または下部に設置したライナになります。ガラスウールを使用していないため、ウールの繊維がGCフローパスに流れ込む心配がありません。
- ・ガラスウールを使用する時と同等の気化特性を持ち、性能と品質の一貫性があります。
- ・ミッドフリットシングルテーパライナ：一般的なスプリット/スプリットレス分析や、塩基性薬物の分析に最適です。
- ・ローフリットシングルテーパライナ：SVOCおよびOC/OP農薬のスプリットレス分析に最適です。

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5190-5105	スプリットレス、UI、ミッドフリットライナ、4mm、1本	¥6,800 → キャンペーン価格 ¥5,780
5190-5105-005	スプリットレス、UI、ミッドフリットライナ、4mm、5本	¥26,000 → キャンペーン価格 ¥22,100
5190-5112	スプリットレス、UI、ローフリットライナ、4mm、1本	¥6,800 → キャンペーン価格 ¥5,780
5190-5112-005	スプリットレス、UI、ローフリットライナ、4mm、5本	¥26,000 → キャンペーン価格 ¥22,100

キャンペーン内容

食品分析でJ&Wウルトラライナートカラム・フリット付ライナをお買い上げいただくと、キャンペーン期間中何度でも定価より**15%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 **2020年8月3日～2020年8月14日**

2週間限定!

本リーフレット記載の『希望販売価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111 www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers