

シンプルながらも高機能な設計！

ガスバスター GB-HYD

水素ガス警報器

Hydrogen gas detector



キャンペーン期間

2026年**10**月**5**日(月)～2027年**1**月**29**日(金) ご注文分迄

大気雰囲気にも漏洩した水素ガスを検知し、危険を知らせます。

応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。
各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。



3色LEDにて
機器の状況をお知らせ



大容量電子ブザー+
高輝度赤LED警報



メンテナンス時の
調整作業不要



外部出力機能搭載

品名	入数	Cat.No	価格	キャンペーン価格
水素ガス警報器 ガスバスター GB-HYD	1台		¥99,000-	¥79,200

ストレスフリーなメンテナンス




期待寿命3年のロングライフセンサーを採用!
しかも、センサー交換はカートリッジを付け替えるだけ。
センサーカートリッジはガス調整済ですので、
センサー交換時の水素ガスによる調整作業は不要です。

シンプル・高機能設計



電源緑色LED、エラー(センサー寿命、機器故障、動作不良)黄色LED、警報赤色LEDの3色で機器状況をお知らせします。
また、大容量電子ブザー+高輝度赤LEDの安心警報!

外部出力機能搭載

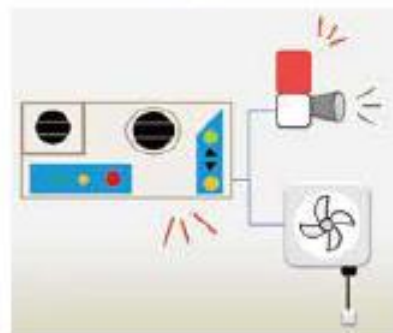

リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。

製品仕様

※ガスバスターシリーズのセンサーカートリッジ(可燃性ガス・接触燃焼式、有毒ガス・電気化学式)は使用できません。

検知ガス	水素
検知原理	半導体方式
表示	LEDランプ (POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)
測定レンジ	100~10,000ppm
警報濃度設定値	500ppm
警報正確度	500ppm±25% (125ppm)
警報遅れ	30秒以内 (警報濃度の1.6倍のガスを暴露し、警報を発するまでの時間)
使用温度	-10~40℃
使用湿度	15~85%RH (結露なきこと)
供給電源	AC100V~240V 50/60Hz 0.5A (ACアダプタ付属)
外形寸法	167W×40D×82H (mm)
質量	約230g (本体のみ)
外部出力	リレー無電圧1c接点 最大許容範囲 DC30V、1A (抵抗負荷)



支える、あらゆる分析を。

ジェエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間: 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・当社休日を除く)



お問合せフォーム

- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。